

maxill

ECONOMICAL **33x** CONCENTRATE



ULTRASONIC CLEANING SOLUTION SOLUTION DE NETTOYAGE À ULTRASONS

- Economical Concentrate
- Corrosion Protection
- Fresh Lemon Scent
- Concentré économique
- Protection contre la corrosion
- Parfum frais de citron

#60037



Fresh
Lemon Scent

1 L (33.8 FL OZ) 1.06 QT

Ultrasonic Cleaning Solution (UCS³³) is an excellent cleaning solution that will thoroughly lift away buffing compound, blood, serum, pumice and other debris from burrs, scalpels, instruments, diamonds, glass slabs, orthodontic appliances, etc. UCS³³ acts quickly, safely and effectively and is gentle on metals that are being cleaned or on metallic parts of your ultrasonic unit.

Directions: Observe good industrial hygiene practices. Wash hands after handling. Store away from incompatible materials. Use the working solution directly in the ultrasonic unit. Dilute 1-part UCS³³ with 32 parts water, near room temperature. E.g. Mix 58 mL / 2 fl. oz. of UCS³³ with water making up a working solution to 1.9 L / 2 qt. Do not add any other chemicals. Subject the instruments to ultrasonic cleaning for 3 to 5 minutes. Rinse instruments well with water and air dry. For best results, change your ultrasonic bath daily or earlier if solution becomes visibly dirty.

La solution de nettoyage à ultrasons (UCS³³) est une excellente solution nettoyante qui élimine en profondeur les résidus de pâte à polir, le sang, le sérum, la pierre ponce et autres débris des fraises, scalpels, instruments, diamants, plaques de verre, appareils orthodontiques, etc. L'UCS³³ agit rapidement, efficacement et en toute sécurité, tout en respectant les métaux à nettoyer et les pièces métalliques de votre appareil à ultrasons.

Mode d'Emploi: Respectez les bonnes pratiques d'hygiène au travail. Lavez-vous les mains après manipulation. Conservez le produit à l'écart de toute matière incompatible. Utilisez la solution de travail directement dans l'appareil à ultrasons. Diluer 1 partie de UCS³³ dans 32 parties d'eau, à température ambiante. Par exemple, mélanger 58 mL / 2 fl oz de UCS³³ avec de l'eau pour obtenir une solution de 1,9 L/2 qt. Ne pas ajouter d'autres produits chimiques. Soumettez les instruments à un nettoyage par ultrasons pendant 3 à 5 minutes. Rincez-les soigneusement à l'eau et laissez-les sécher à l'air libre. Pour un résultat optimal, renouvelez la solution de votre bain à ultrasons tous les jours, ou plus tôt si celle-ci semble sale.


Made in Canada with domestic and imported parts.
Fait au Canada avec des composants canadiens et importés

maxill inc.
www.maxill.com 1-800-268-8633

Manufacturer:
maxill inc.
St. Thomas, ON
N5R 6C8 Canada

Distributed in USA by:
maxill inc.
Cortland, OH
44410 USA

REF 6070560037

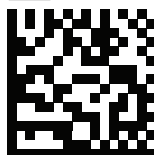

+D89260705600370L

REV.2026/04